

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-aseptor-basic-295-w-p-50.html>

Lampa bakteriobójcza ASEPTOR Basic 295 W



Cena brutto	3 567,00 zł
Cena netto	2 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ASB 295 W

Opis produktu

Przepływowa lampa bakteriobójcza ASEPTOR Basic 295 W ze sposobem montażu naściennie-sufitowym. Zaletą tej wersji montażu jest estetyczny wygląd oraz poprowadzenie przewodu zasilającego tak, aby ukryć go za kopułą lampy. Urządzenie gwarantuje stały i wysoki stopień dezynfekcji powietrza z wirusów, bakterii, pleśni, grzybów i wszelkich innych mikroorganizmów. Skuteczna ochrona przed wszystkimi mikrobami.

Aseptor Basic 295 W przeznaczony jest do stosowania na blokach operacyjnych i salach chorych, w laboratoriach, izbach przyjęć, poczekalniach, korytarzach oraz wszelkich skupiskach ludzi. Sprawdzi się również w przedszkolach, żłobkach, szkołach i urzędach. Swoją estetyką pasuje również do gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, SPA oraz hoteli i restauracji. Wysoką skuteczność dezynfekcji Aseptora potwierdzają niezależne badania wykonane w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi.



Działanie:

Urządzenie służy do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Wbudowany wentylator wymusza przepływ powietrza przez


urządzenie. Wewnątrz szczelnej obudowy powietrze jest naświetlane promieniowaniem UV-C o długości fali 253,7 nm. Dzięki jego właściwościom światło UV-C eliminuje wszystkie bakterie, pleśnie, grzyby oraz wirusy z powietrza.

Cały proces jest w pełni bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin.

Wykonanie:

Możesz zamówić Aseptora w standardowym wykończeniu - **lakierowany proszkowo na biało**

Wybierz wersję **INOX** - wtedy Aseptor będzie wykonany ze stali kwasoodpornej

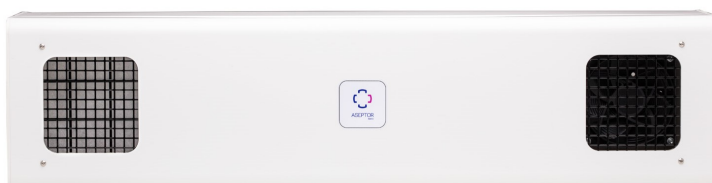

wersja standard



wersja INOX

Wersja montażu:

Wersja W oznacza montaż naścienny. Przewód należy wpiąć do instalacji i wyprowadzić włącznik klawiszowy na ścianie lub wybrać opcję z pilotem zdalnego włączania.



montaż naścienny

Akcesoria do wyboru:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o zaawansowany licznik czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację:



zaawansowany licznik czasu pracy



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , INOX (+ 492,00 zł)

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Zaawansowany licznik czasu pracy - C (+ 270,60 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC ASB (+ 209,10 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
- Moc pobierana z sieci: 200 W
- Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV95W lub HNS-L 95W
- Trwałość promienników (h): 9 000h
- Wydajność wentylatora: 165 m³/h
- Przepływ powietrza: 80 m³/h
- Dezynfekowana kubatura: 200 m³
- Powierzchnia (zasieg) działania lampy: 80 m²
- Głośność wentylatora:
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Typ obudowy: IP 20
- Klasa dla środowiska medycznego B - home
- Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1
- Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK
- Wymiary kopuły: 1170 x 250 x 155 mm
- Gabaryty - wersja ścienna W: 1170 x 250 x 155 mm
- Waga kopuły: 12,4 kg
- Waga - wersja ścienna W: 13,8 kg

Zalety

- jakość gwarantowana przez producenta sprzętu medycznego,
- bardzo dobre wyniki badań skuteczności,
- świetny stosunek jakości do ceny,
- wyjątkowo cicha praca (praktycznie niesłyszalna),
- estetyczny wygląd,
- 2-letnia gwarancja,
- powszechna dostępność części zamiennych,
- lampa UV-C ASEPTOR Basic nie wymaga przeglądów.

Wideo

Poznaj przepływowe lampy bakteriobójcze ASEPTOR - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- jak działa przepływowa lampa bakteriobójcza,
- jak wymienić w niej filtr,
- czym różni się od zwykłego oczyszczacza powietrza.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.